

# Fairywill

Model: T9

## Звуковая электрическая зубная щетка

### Руководство по эксплуатации (RU)

Благодарим вас за выбор звуковой зубной щетки Fairywill T9. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции перед использованием продукта и сохраните руководство пользователя в надежном месте для использования в будущем.


#### 1. Характеристики:

- Водонепроницаемый и нескользящий корпус.
- Сменные чистящие насадки с уникальной трехмерной формой щетины и функцией напоминания о замене щетины, чтобы ваши зубы оставались белее и здоровее.
- Высокочастотная вибрация эффективно удаляет зубной налет, глубоко очищая зубы и десны и предотвращая гингивит.
- USB-зарядка, удобство для путешествий и совместимость с мировым напряжением.
- Функция напоминания о низком заряде: при низком заряде аккумулятора индикатор будет продолжать быстро мигать или зубная щетка не сможет включиться во время рабочего процесса, как напоминание о необходимости зарядки зубной щетки.
- 2-минутный интеллектуальный таймер с интервальными паузами, который напомнит вам менять место чистки каждые 30 секунд.
- В зубной щетке есть 3 режима: чистка, мягкий и массаж. В щетку также

встроена функция памяти режимов, что означает, что при включении зубной щетки начальный режим по умолчанию остается таким же, как и режим, который был установлен во время последнего отключения зубной щетки.

## 2. Конструкция:

- ① Насадка щетки
- ② Кнопка Питание/Режим
- ③ Индикатор Режима/Зарядки
- ④ Рукоятка
- ⑤ Порт зарядки
- ⑥ Накладка рукоятки

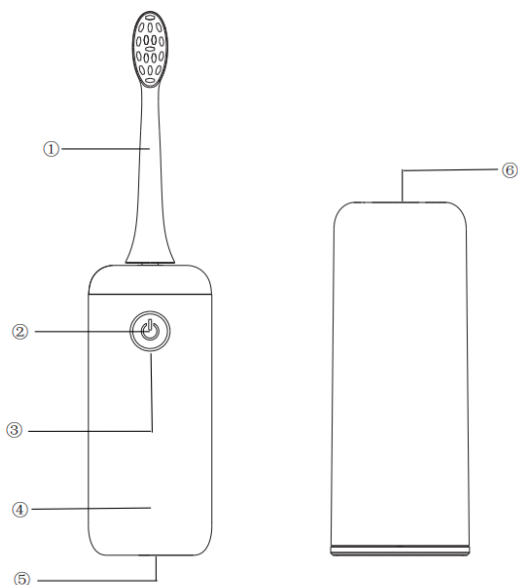

## 3. Операции:

### ☆ Использование зубной щетки

- Задвиньте насадку зубной щетки вниз к ручке и убедитесь, что она зафиксирована в правильном положении.
- Включите зубную щетку, нажав кнопку «Питание».
- Переключайтесь между 3 режимами («Чистка, Мягкий и Массаж»), непрерывно нажимая кнопку «Питание».
- Смочите щетину и нанесите на щетку необходимое количество зубной пасты.
- Приложите щетину с зубной пастой к зубам под небольшим углом к линии десен.
- Осторожно проведите насадкой по зубам на передней, задней и всех жевательных поверхностях. Щетка должна скользить по зубам с

минимальным давлением. Не прикладывайте слишком сильное давление к зубам / деснам и не прикладывайте щетину к одной области рта в течение длительного периода времени.

- Щетка оснащена 2-х минутным интеллектуальным таймером, так как стоматологи рекомендуют это время как оптимальное время для чистки зубов, и каждые 30 секунд есть пауза, чтобы напоминать о необходимости перейти в другую часть ротовой полости.
- Перейдите в другую часть ротовой полости, когда почувствуете паузу, а зубная щетка автоматически выключится через 2 минуты.
- Чтобы избежать разбрызгивания зубной пасты, включайте зубную щетку только после того, как прижали ее к зубам, и вынимайте ее изо рта только после выключения.

#### ☆ Замена насадки для зубной щетки

- Установка: задвиньте насадку зубной щетки вниз к ручке. Убедитесь, что она находится в правильном положении.
- Отсоединение: крепко держите основание, затем потяните насадку зубной щетки от ручки.

#### ☆ Зарядка зубной щетки

- Если при первом включении зубная щетка разряжена, убедитесь, что она полностью заряжена для повторного включения.
- Если зубная щетка не используется более 3 месяцев, перед использованием полностью зарядите ее в соответствии с инструкциями по зарядке.
- Если во время работы индикатор быстро мигает, это означает, что в зубной щетке разряжен аккумулятор, зарядите зубную щетку как можно скорее.
- Когда вы собираетесь заряжать зубную щетку, вставьте USB-кабель в порт зарядки в нижней части зубной щетки и убедитесь, что щетка надежно подключена к источнику питания.
- Индикатор зарядки будет белым и будет медленно мигать во время процесса зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор

загорится на две минуты и больше не будет мигать, через 2 минуты он автоматически выключится. После того, как зубная щетка полностью зарядится, ее можно использовать в течение двух минут за сеанс дважды в день в течение 20 дней.

- Зубная щетка обладает водонепроницаемой функцией, поэтому ее можно безопасно использовать в ванной.

#### ☆ Режимы

- **Первый режим: Чистка**

В этом режиме белый индикатор включается и быстро прокручивается, размах щетки большой, а интенсивность вибрации самая сильная. Он подходит для нормального состояния ротовой полости, для получения сильнейшего очищающего эффекта и поддержания здоровой гигиены полости рта.

- **Второй режим: Мягкий**

В этом режиме белый индикатор включается и медленно прокручивается, движение щетки мягкое, а интенсивность вибрации самая мягкая из трех режимов, что подходит для пользователей с чувствительными зубами.

- **Третий режим: Массаж**

В этом режиме включается белый световой индикатор, чередуя быструю и медленную прокрутку, быстро меняется движение щетки и интенсивность вибрации. Это мягкая стимуляция для сохранения упругости и здоровья десен.

#### **4. Технические характеристики:**

Рабочая температура: 0-50°C

Рабочее напряжение: 3,7 В постоянного тока

Материал щетины: нейлон

Входное напряжение: 5,0 В постоянного тока

Номинальная мощность: 2 Вт

Время зарядки: 2 часа

Водонепроницаемость: IPX7

## **5. Меры предосторожности:**

- Запрещается разбирать, ремонтировать или изменять продукт без разрешения.
- Людям, страдающим тяжелыми заболеваниями пародонта или имевшим хирургические вмешательства в полости рта, следует проконсультироваться с врачом перед использованием.
- Дети, младенцы и люди, которые не могут самостоятельно управлять щеткой, должны находиться под присмотром родителей или взрослых.
- Не замачивайте изделие в воде на продолжительное время.
- Не помещайте зубную щетку в условия высокой температуры и не подвергайте ее воздействию солнечных лучей.
- Не прижимайте щетину сильно к зубам или деснам.
- Не подходит для детей младше 12 лет.
- Для обеспечения наилучших результатов головка щетки должна храниться в хорошо проветриваемом и сухом месте; не храните щетку на рукоятке, если только вы не храните ее в ручной или багажной сумке.

## 6. Устранение неисправностей:

Неисправность	Возможная причина	Решение	Примечание
Интенсивность вибрации становится слабее	1. Зубная щетка сильно прижата к зубам; 2. Насадка щетки установлена слишком туго на ручке	1. Осторожно присоедините насадку щетки к зубам. 2. Отсоедините насадку щетки от ручки и снова установите ее на привод.	Если есть какие-либо сомнения, пожалуйста, обращайтесь за помощью в отдел обслуживания клиентов.
Уже заряженная зубная щетка может работать только короткое время	Зубная щетка разряжена	1. Недостаточно е время зарядки, пожалуйста, зарядите еще раз. 2. Зубная щетка не использовалась более 3 месяцев, зарядите ее снова. 3. Вышел срок службы аккумулятора зубной щетки, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по вопросам замены или ремонта.	

<p>Зубная щетка перестает работать</p>	<p>1. Зубная щетка не заряжена; 2. Зубная щетка неисправна</p>	<p>1. Вставьте USB-кабель в порт зарядки в нижней части зубной щетки и убедитесь, что щетка надежно подключена к источнику питания, и горит индикатор. 2. Свяжитесь с отделом обслуживания клиентов для ремонта.</p>	
--	--	--	--

## **7. Послепродажное обслуживание:**

- Годовая гарантия начинается с дня покупки, при необходимости свяжитесь с Fairywill.
  - В течение гарантийного срока при любом дефекте материала или неисправности продукта, мы заменим детали или весь продукт в зависимости от ситуации и его состояния.
  - Когда вы подаете заявку на гарантийный ремонт, вы должны предоставить Fairywill зубную щетку и подтверждение даты покупки (счет-фактуру).
  - Гарантия не распространяется на следующее:
    - Повреждения, вызванные неправильным использованием, например, неправильным использованием источника питания, подключением к неправильной розетке, неестественным повреждением и т.д.
    - Старение и износ в результате нормального использования.
    - Повреждения из-за использования продукта для других целей или использования компонентов, не от Fairywill.
-